


複数波形の同時表示機能

ISCEV protocol による波形表示が一覧表示できます。経過観察が簡単に分析できます。


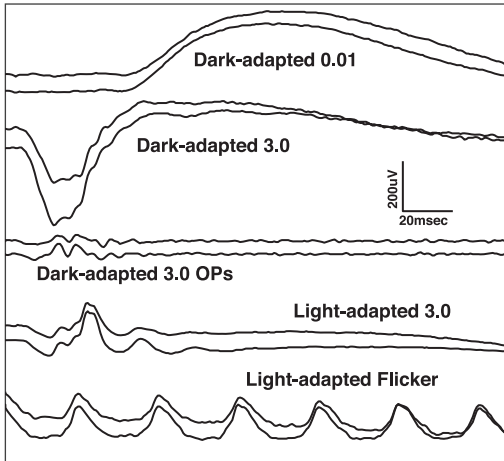


プリントアウト

患者情報
ID: 12345
氏名: 火野龍 太郎
年齢: 59 性別: 男性
担当:

検査日時: 2009/09/15 16:46:25


検査条件
検査種目: Dark-adapted 3.0 ERG (maximal standard combined rod-cone response)
加算回数: 1 / 1 回 刺激強度: Hz
加算除外回数: 0 回
アンプのゲイン: Ch1: 10 × 1000 Ch2: 10 × 1000
アナログフィルター Ch1 High Pass Filter: 0.3 Hz Low Pass Filter: 500 Hz
アナログフィルター Ch2 High Pass Filter: 0.3 Hz Low Pass Filter: 500 Hz

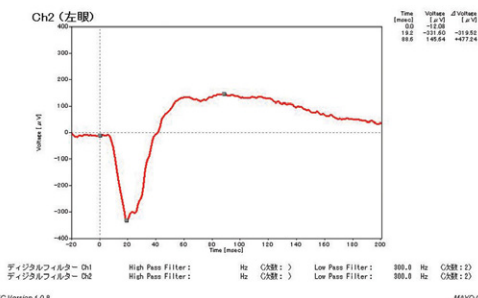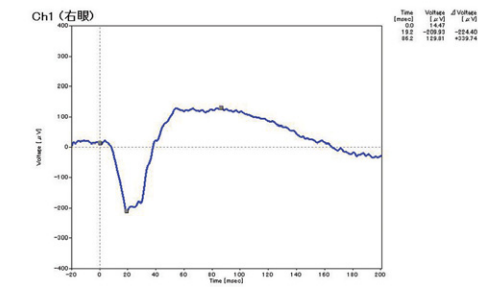

※本製品は、愛知県立大学の戸田尚宏教授が開発した、ACノイズ除去エンジンPURE (Pulse REference power line noise reduction) を搭載しています。

ピュアな記録ができます。

劣悪なノイズ環境下でも、忠実に反応を記録します。従来のノッチフィルタのように原波形をくずしません!

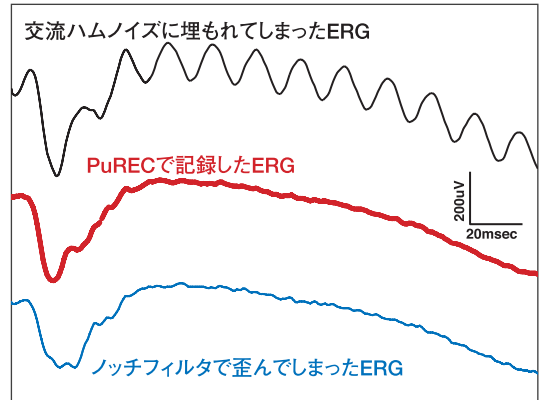

暗室対応ハイコントラスト画面

黒の背景に白文字の視認性のよい表示で、暗室での操作性を良くし、暗順応した眼を保護します。

オートフラッシュ機能

光刺激は基線がゼロ近傍に落ち着いたとき、自動的に発光するため基線が安定した記録が可能です。

デジタルフィルタ機能

検査中および検査後にハイパスとローパスデジタルフィルタ処理を行うことが可能です。

仕様

入力チャンネル	2
入力インピーダンス	5MΩ以上
周波数特性	0.3~500Hz (標準)
信号増幅率	10,000倍 (標準)
弁別比	80dB以上
電源電圧	100V, 50/60Hz
消費電力	300VA
標準セット	メインユニット、生体信号増幅器、プリアンプ 絶縁トランス、ピュレックソフトウェア
オプション	プリンタ、架台
医療機器に関する情報	認証番号: 221AGBZX00232000 類別: 機械器具 21 内臓機能検査用器具 一般の名称: 誘発反応測定装置 (70068000)

※詳細につきましては、別途お問い合わせください。仕様・外観等は予告無しに変更する場合があります。



製造・販売元

有限会社 **メイヨー**

稲沢研究所: 〒492-8213

愛知県稲沢市高御堂二丁目25番22号

TEL:0587(33)0120 FAX:0587(33)0121